



**Harnais UniversalSling 000 :** Le UniversalSling Liko est un modèle de base conçu pour s'adapter à tous les patients, sans besoin de réglage individuel. C'est l'un de nos harnais les plus utilisés. Le UniversalSling permet de placer le patient en position assise droite et soutient l'ensemble du dos jusqu'au cou. Si la tête du patient doit être soutenue, il est recommandé d'utiliser un harnais à dos rehaussé, par exemple le Original HighBack Sling Modèle 200/210. Existe en taille S, M, L ou XL.

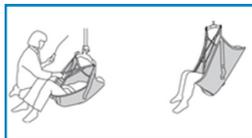

**Harnais Original Highback 200 :** Le harnais Original dos rehaussé est un modèle de base conçu pour s'adapter à tous les patients, sans besoin de réglage individuel. Il est l'un de nos harnais les plus utilisés. Il offre une position assise légèrement penchée en arrière et soutient tout le corps, ce qui convient aux patients qui ont un maintien réduit du tronc. Il est recommandé pour un ramassage au sol. Existe en taille S, M, L ou XL.

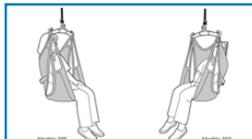

**Harnais ConfortSling 300 ou 350 :** standard (300) ou à dos réhaussé (tête 350). Ce harnais ne se croise pas à l'entrejambe. Le ComfortSling Plus convient aux patients particulièrement sensibles présentant des douleurs musculaires ou articulaires. Il convient souvent même aux amputés car il offre un soutien sous toute la surface de l'assise. Ce harnais peut être laissé sous le résidant au fauteuil. Ce modèle existe en taille S, M, L ou XL.



**Harnais Silhouettesling 22 :** Modèle découpé avec dos réhaussé. Ce harnais est légèrement incliné vers l'arrière et correspond à des patients dont le maintien de tête et de tronc est faible. Par sa conception et son matériau, le harnais SilhouetteSling convient particulièrement aux transferts vers les sièges moulés puisque le harnais reste généralement dans le fauteuil roulant une fois l'opération de levage terminée. Il n'existe qu'en taille M (slim adulte) et L.



**Harnais Hygienevest 55 :** Le harnais HygieneVest est destiné au levage de siège à siège. La position assise est presque complètement droite, ce qui facilite les levages vers les toilettes et le positionnement dans un fauteuil roulant. Le harnais HygieneVest n'étant pas placé sur les hanches, il est idéal pour le levage depuis/vers des sièges moulés sur mesure et des fauteuils roulants bien ajustés. Ce harnais ne doit pas rester en place; Ce modèle existe en taille S, M, L ou XL.



**Harnais Hygienesling 45 :** Avec le harnais HygieneSling, l'habillage et le déshabillage peuvent s'effectuer pendant l'opération de levage, grâce à la grande ouverture autour du siège du harnais. Le patient doit avoir une stabilité du torse et de la tête relativement bonne pour pouvoir s'asseoir confortablement et en toute sécurité dans ce harnais. Pour les patients manquant de tonus musculaire, il est recommandé d'utiliser un harnais de taille plus petite ou HygieneVest, modèle 55. Ce modèle existe en taille S, M, L ou XL.

Harnais d'hygiène



**BESOIN D'AIDE ?  
CONTACTEZ-NOUS**

fh. Moyens Auxiliaires  
Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates  
T. 022 794 52 54